

Maxx Chamber[®]


Adulto

Instruções de uso


O **Espaçador Maxx-Chamber[®] Adulto** é um produto especialmente desenvolvido com o objetivo de facilitar a administração de medicação inalatória. É um espaçador de fácil manejo, com encaixe flexível que se adapta em todos os aerossóis disponíveis no mercado.

O **Espaçador Maxx-Chamber[®]** poderá ser utilizado para administrar diferentes medicamentos inalatórios.

Uso com máscara:

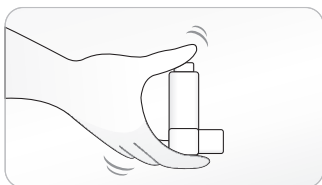

1. Retire a tampa do aerossol e agite-o bem, para assegurar a liberação adequada da medicação.

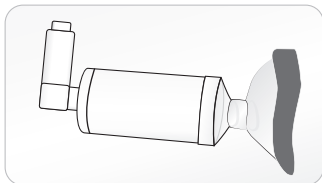


2. Encaixe o aerossol no Maxx-Chamber conforme ilustração acima e posicione a máscara na face.



3. Mantenha a inclinação indicada acima e observe se a boca e o nariz estão bem envolvidos pela máscara e respire normalmente.

Uso sem máscara:

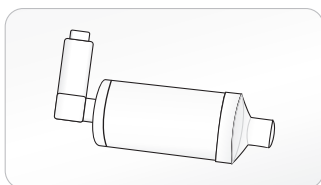

1. Encaixe o aerossol no Maxx-Chamber conforme ilustração acima e mantenha a inclinação indicada.



2. Mantenha o espaçador o tempo necessário para realizar 3 a 4 inspirações ou conforme orientação do médico.



3. Inspire lentamente pela boca, fazendo pequena pausa com o objetivo de aumentar a deposição da medicação no pulmão.

Cuidados especiais sobre o uso do produto

Antes de cada utilização assegure-se de que não há objetos estranhos no interior do corpo do **Espaçador Maxx-Chamber**.

Se o médico prescrever dois ou mais jatos de medicação, aplique cada jato separadamente e não se esqueça de agitar o aerossol antes de cada novo jato.

As válvulas de inalação e exalação são essenciais na administração da medicação, portanto **NÃO** devem ser retiradas do **Espaçador Maxx-Chamber**.

Desinfecção do Espaçador Maxx-Chamber® Uso Doméstico

- 1.Desacoplar o adaptador flexível, a máscara e a peça de conexão da máscara, da câmara em policarbonato do espaçador.
- 2.Mergulhar as partes desacopladas em água acrescida de detergente neutro, por vinte minutos.
- 3.Enxaguar as partes em água filtrada, com movimentos suaves e colocá-las para secar em local protegido de luz solar.
- 4.Acoplar novamente o adaptador flexível, a peça de conexão da máscara e a máscara, à câmara em policarbonato do espaçador.
- 5.Depois de seco, guardar novamente o **Espaçador Maxx-Chamber** no plástico, em local protegido da luz solar, do calor excessivo e longe do alcance das crianças.

Desinfecção do Espaçador Maxx-Chamber® Uso Hospitalar

- 1.Separar o material necessário: água destilada, esponja macia, sabão neutro, solução de Hipoclorito de Sódio 2% ou solução de Ácido Peracético 0,2%, luvas de procedimento e o **Espaçador Maxx-Chamber** completo.
2. Lavar as mãos.
3. Calçar as luvas.
4. Desacoplar o adaptador flexível, a máscara e a peça de conexão da máscara, da câmara em policarbonato do espaçador.
5. Lavar todas as partes em bacia com sabão neutro, esfregando por dentro e por fora com esponja macia.
6. Enxaguar as partes em água abundante, com movimentos delicados.
7. Secar as partes com toalha descartável apropriada.
8. Emergir todas as partes em solução de Hipoclorito de Sódio 2% ou solução de Ácido Peracético 0,2%, durante trinta minutos.
9. Após trinta minutos, enxaguar abundantemente com água filtrada.
10. Fazer o último enxágue com água destilada.
11. Secar com compressa esterilizada.
12. Após certificar-se da secagem completa das partes, acoplar novamente o adaptador flexível, a peça de conexão da máscara e a máscara, à câmara em policarbonato do espaçador.
13. Embalar o **Espaçador Maxx-Chamber** em saco plástico limpo e individual, colocando etiqueta com o status de limpo e a data.
14. Organizar a unidade.

Observação:

Na ocorrência do uso do **Espaçador Maxx-Chamber** por paciente em procedimento de isolamento, após a desinfecção, deverá ser encaminhado para esterilização por Óxido de Etileno.

Nº de Lote: vide rótulo | **Data de Fabricação:** vide rótulo

Garantia: 6 meses contra defeitos de fabricação.

Validade: Indeterminada.

Fabricado por



www.rsmed.com.br • SAC: +55 31 3271-4276

RS MED Ltda
Rua Abaeté, 526 - Bonfim
Belo Horizonte - MG - Brasil
CEP 31210-390
CNPJ: 03.840.189/0001-19
AUTORIZ/MS: 8.04707.5
Cad. ANVISA: 80470750004